

SBRT立体定位架

型号 MC-STF001

- ✓ 精准度高
- ✓ 舒适性好
- ✓ 功能性强
- ✓ 人性化操作



放射治疗定位装置

► SBRT 固定系统

美岑 SBRT 固定系统是基于临床需求而研发的 SBRT 放疗定位解决方案, 可通过适配条固定在医科达, 瓦里安或其他品牌的床板上使用, 具有精准度高、舒适性好、功能性强和操作简易等特点。腹部和膝部弓形桥可左右、上下调节, 弓形桥的快锁和解锁功能操作便捷, 毫米级刻度用于记录固定的位置。该系统通过可全方位调节的弓形桥以适应不同体型的患者, 底板和弓形桥上都刻有丰富的刻度标识, 提高摆位重复性的精度。腹压装置可有效控制患者在治疗过程中的呼吸幅度。

SBRT 底板可搭配 SRS 头部固定架、翼型底座、人体定位袋、定位膜等产品使用, 支持多种固定方案。



访问官方网站视频栏目或扫描右侧二维码观看产品视频。



► SBRT 固定系统



精准度高

清晰、精准的刻度标识
提高摆位重复性的精度

舒适性好


人体工程学设计
减轻患者压迫感

功能性强

多功能设计, 可根据不同需求调整组合方式

人性化操作

操作简易快捷

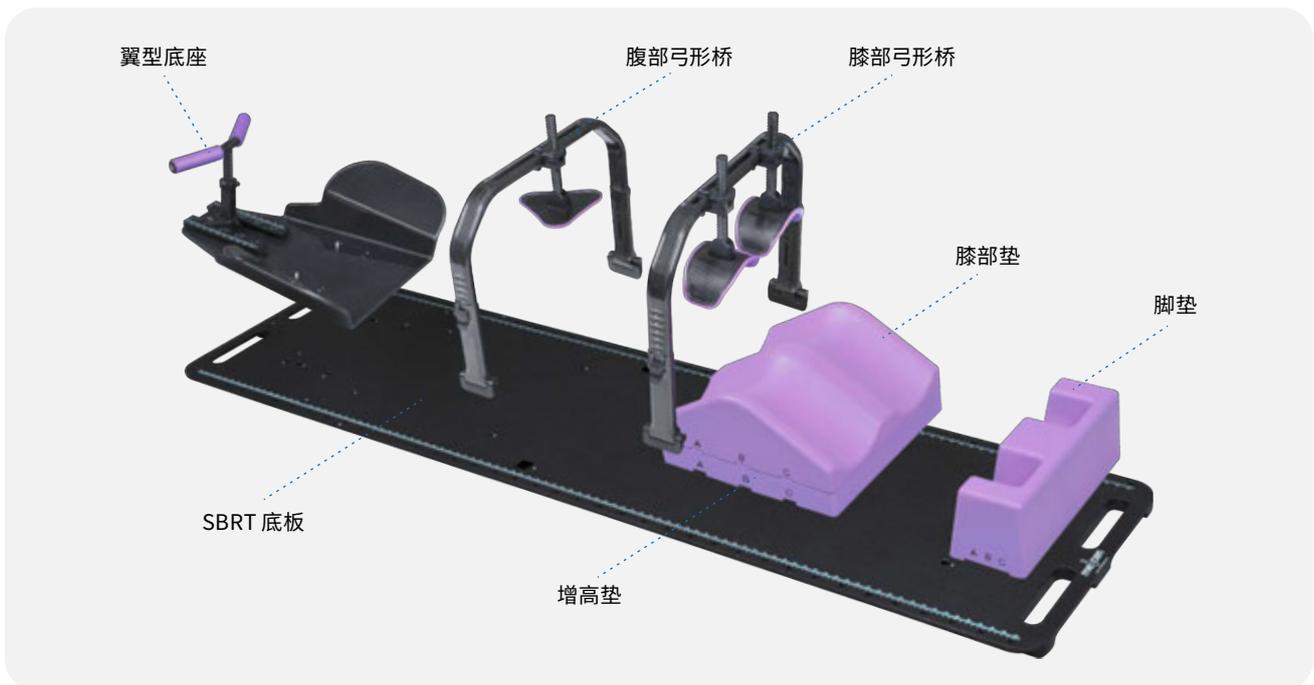

放射治疗定位装置

► SBRT 立体定位架


型号 MC-STF001



SBRT 固定系统配置方案

	描述	型号	数量
标准配置方案 型号: MC-STF001	SBRT 底板	MC-STF001-A01	1
	翼型底座	MC-WBF001	1
	腹部弓形桥	MC-STF001-A02	1
	膝部弓形桥	MC-STF001-A03	1
	膝部垫	RE-FCA01	1
	增高垫	RE-FCA02	1
	脚垫	RE-FCA03	1
	SBRT 适配条	MC-STF001-A07	3
	工字条	RC-LBC03	2
选配	碳纤维头枕	RE-HSF6	1
	透明头枕	RE-HSC6	1
	PU 头枕	RE-HSB5	1
	SRS 头部固定架	MC-SRF001	1
	人体定位袋	RC-D3002F	1
	肩部牵引器	MC-STG001-A08	1
	适配条 (适用于医科达床板)	RC-LBE02	2
	适配条 (适用于瓦里安床板)	RC-LBV02	2

更多选配

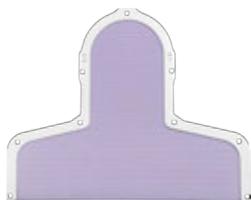

S头颈肩型(窄肩款)



体型定位膜



SRS头部固定架

MR-SBRT 立体定位架

型号

MC-STG001



MR-SBRT 固定系统配置方案

	描述	型号	数量
标准配置方案 型号: MC-STG001	SBRT 底板	MC-STG001-A01	1
	腹部弓形桥	MC-STG001-A02	1
	膝部弓形桥	MC-STG001-A03	1
	翼型底座	MC-WBG001	1
	膝部垫	RE-FCA01	1
	增高垫	RE-FCA02	1
	脚垫	RE-FCA03	1
	SBRT 适配条	MC-STG001-A07	3
	工字条	RC-LBC03	2
选配	透明头枕	RE-HSC6	1
	PU 头枕	RE-HSB5	1
	SRS 头部固定架	MC-SRG001	1
	人体定位袋	RM-D3002F	1
	肩部牵引器	MC-STG001-A08	1
	适配条 (适用于医科达床板)	RM-LBE01	2
	适配条 (适用于瓦里安床板)	RM-LBV01	2

放射治疗定位装置

配置产品

SBRT 底板

MC-STF001-A01	碳纤维材质
MC-STG001-A01	MR 兼容材质

- 多孔位组合方式;
- 重量轻, 便于移动。



翼型底座

MC-WBF001	碳纤维材质
MC-WBG001	MR 兼容材质

- 翼型底座可单独用于乳腺胸肺体位固定;
- 加宽翼面手肘不悬空, 搭配翼型人体定位袋可包裹手肘固定。



腹部弓形桥

MC-STF001-A02	碳纤维材质
MC-STG001-A02	MR 兼容材质

- 符合人体工程学设计的腹压装置, 更舒适;
- 腹压装置左右、上下可调, 并有刻度记录固定位置, 提高复位的精度。



膝部弓形桥

MC-STF001-A03	碳纤维材质
MC-STG001-A03	MR 兼容材质

- 膝压板装置左右、上下可调节, 并有刻度记录固定位置, 提高复位的精度;
- 可选择双腿或单腿固定。



配置产品

膝部垫 & 增高垫 & 脚垫

- 操作简便，提升仰卧位固定舒适性和稳定性；
- 可根据不同体型进行灵活调节；
- 可单独用于常规放疗。



人体定位袋

RC-D3002F

RM-D3002F MR兼容材质


- 头枕开放式，可与头枕配套使用；
- 用于乳腺胸肺放疗体位的固定；
- 配备手臂定位区域及支撑躯干区域。

尺寸: 125x110cm



肩部牵引器 MC-STG001-A08

- 可与SBRT底板搭配使用，有效提升患者舒适度，减少患者无意识移位的情况。

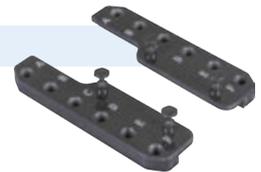

头枕

- 碳纤维材质，6种规格，RE-HSF6；
- PU头枕，5种规格，RE-HSB5；
- 透明头枕，6种规格，RE-HSC6。



SBRT 适配条

MC-STF001-A07 碳纤维材质

MC-STG001-A07 MR兼容材质

- 用于将其它组件固定在SBRT底板上。





品质至上 以人为本 诚信经营 追求卓越

广东美岑医疗设备有限公司

电话: 0757-86269115

邮箱: sales@meicenmed.com

地址: 佛山市南海区狮山镇小塘工业大道五星段82号万洋创智园5栋



电子画册



公众号