

# 乳腺胸肺解决方案



## ► 乳腺胸肺解决方案

### 翼型底座

美岑翼型底座采用优质碳纤维材料，一体成型，经久耐用，重量轻。底座外形采用人体工程学设计，搭配人体定位袋使用，极大提高了患者治疗的舒适度及定位的精准度。根据治疗方案需求可选配头枕，人体定位袋等配套产品。

MC-WBF001 翼型底座 (T型把手, 碳纤维材质)

MC-WBF002 翼型底座 (U型把手, 碳纤维材质)

- 保持患者手臂上举，可有效降低手臂对胸腹位置靶区的射线阻挡；
- 患者手臂上举保持抓握状态，可提升患者固定的稳定性和精准度；
- 翼型底座保证手臂姿态，搭配翼型人体定位袋可对肘部位置进行塑形操作，确保复位的精准度。



MC-WBF001-A01 T型把手 (碳纤维材质)

MC-WBG001-A01 T型把手 (MR兼容材质)



RC-HGF01 U型把手 (碳纤维材质)

RM-HGG01 U型把手 (MR兼容材质)



MC-WBG001 (MR兼容材质)



## 放射治疗定位装置

### 乳腺胸肺解决方案

#### 乳腺托架

MC-RXF002 碳纤维材质

MC-RXG002 MR兼容材质

- 乳腺托架共有5挡角度调节；
- 体部采用镂空设计，在治疗过程中可以最大限度减小射线阻挡；
- 臂托可进行全方位调节，并搭配刻度和挡位，提升治疗过程的舒适性和提高摆位、复位的精准度；
- 搭配翼型底座使用可以解决胸部摆位角度问题；
- 可搭配胸型定位膜、S型定位膜使用，提高复位精度。



臂托 MC-RXF001-A02



腕托 MC-RXF001-A01



#### 选配产品

##### 胸型定位膜

- 搭配乳腺托架固定可减少患者无意识移位的情况，提高摆位的重复性和舒适性。
- M2422-VSH190W 标准款



MC-WBF003



## 乳腺俯卧位固定底座

MC-RBF001 碳纤维材质

- 底座头部和胸部、腹部配套支撑垫，支撑垫软硬适中，舒适耐用；
- 胸部U型软垫可根据治疗方案需求或体型需求选择合适的尺寸；
- 胸部U型软垫可根据治疗方案需求进行左右互换，操作简便；
- 俯卧位头枕可以根据患者体型进行前后调整。



可更换组件:



MC-RBG001-A01



MC-RBG001-A02



MC-RBG001-A03



MC-RBG001-A04




MC-RBG001-A05

### 选配产品

#### 体型定位膜

- 适用美岑乳腺俯卧位固定底座，减少患者无意识移位的情况，并提高复位的准确性。
- M2422-VHT289W 标准款

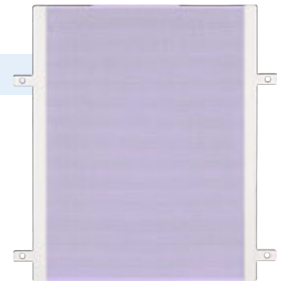



品质至上 以人为本 诚信经营 追求卓越

广东美岑医疗设备有限公司

电话: 0757-86269115

邮箱: sales@meicenmed.com

地址: 佛山市南海区狮山镇小塘工业大道五星段82号万洋创智园5栋



电子画册



公众号